

# **BLUE CAP**


## **Lampada polimerizzante wireless**



Blue Cap è una lampada fotopolimerizzante leggera e senza fili, che emette una potente luce blue con la lunghezza d'onda di 430-490 Nm, Blue Cap è progettata per polimerizzare al meglio i materiali compositi sensibili alla luce.

Il posizionamento della lampada nel suo caricatore, assicura sempre il massimo mantenimento della carica: un click e una

potente luce è subito disponibile: **Blue Cap** è dotata di 4 programmi di lavoro per adattarsi a diversi tipi di materiali e ad ogni esigenza che si dovesse presentare all'utente.

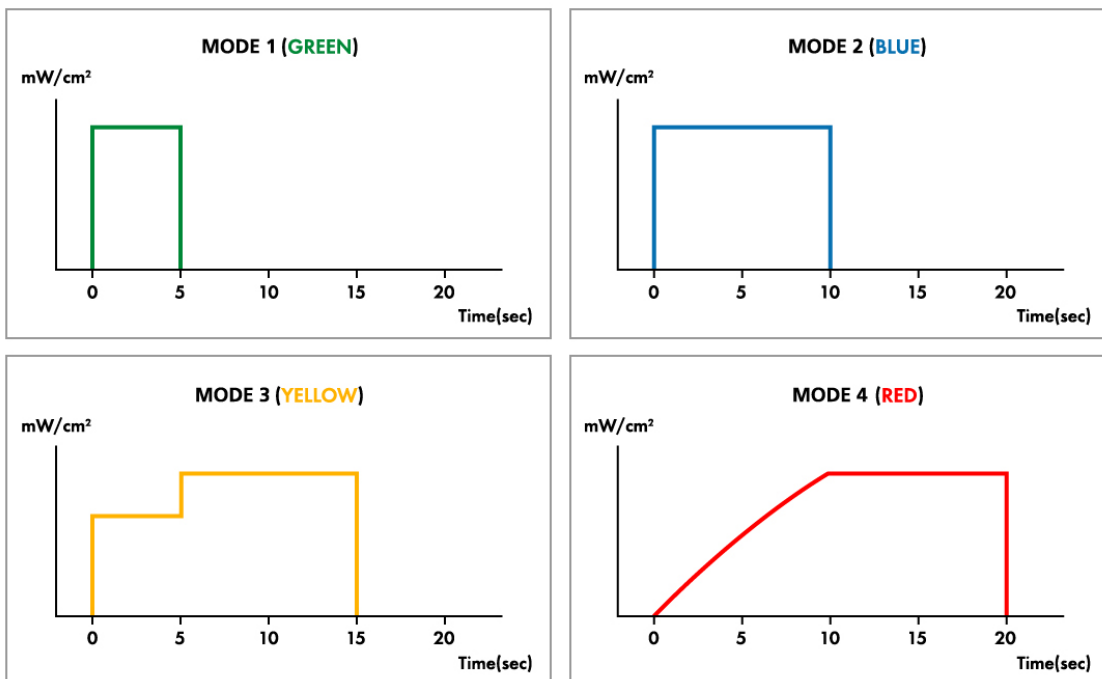


Selezione programmi	Colore del led	Descrizione del programma
1 click	<b>Verde</b>	Luce al Massimo livello per 5 secondi
2 clicks	<b>Blue</b>	Luce al Massimo livello per 10 secondi
3 clicks	<b>Arancione</b>	<b>Programma a 2 gradini:</b> all'inizio 5 secondi di luce al 70% della massima intensità, seguita da 10 secondi di luce alla massima intensità
4 clicks	<b>Rosso</b>	<b>Programma con partenza soffice:</b> aumento graduale di luminosità a partire dal 10% della massima intensità che aumenta, in 10 secondi, alla massima intensità, seguita da 10 secondi alla massima intensità

Una sicura ed affidabile elettronica integrata assicura il controllo di ogni processo; gli oltre 1000 mW/cm<sup>2</sup> di potenza resa da un potente LED, assicurano la massima resa e la maggior durata delle batterie della lampada Blue Cap.



Blue Cap è disponibile anche in una versione Fissa, da integrare nel riunito con le stesse prestazioni, un cavo rapido al silicone assicura un sicuro collegamento e ne permette la intercambiabilità tra diverse postazioni.

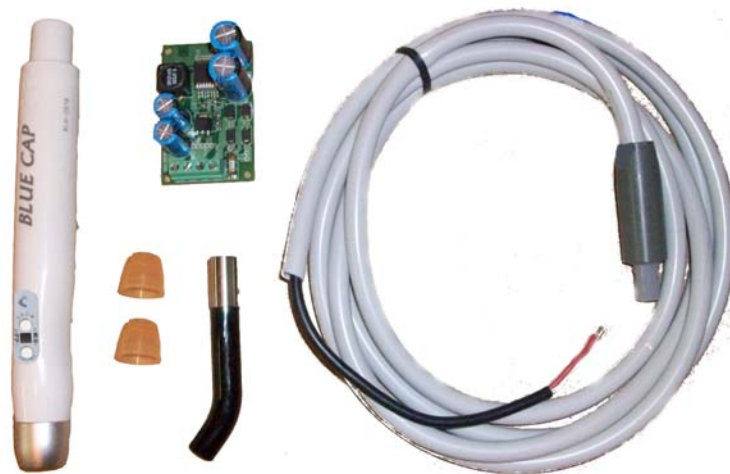

Questa versione viene completata da una scheda di alimentazione che accetta tensioni da 12 a 24 volt AC/DC.

Blue Cap è un prodotto Certificato in classe II secondo la 93/42 e conforme alla EN 60601-1.